


Suspicion d'un lymphome

1. Informer le patient (formulaire consentement éclairé)
2. Prévenir le pathologiste
3. Prévenir le laboratoire CMF (si demande d'immunophénotypage)

CMF : Tél : 02 31 06 53

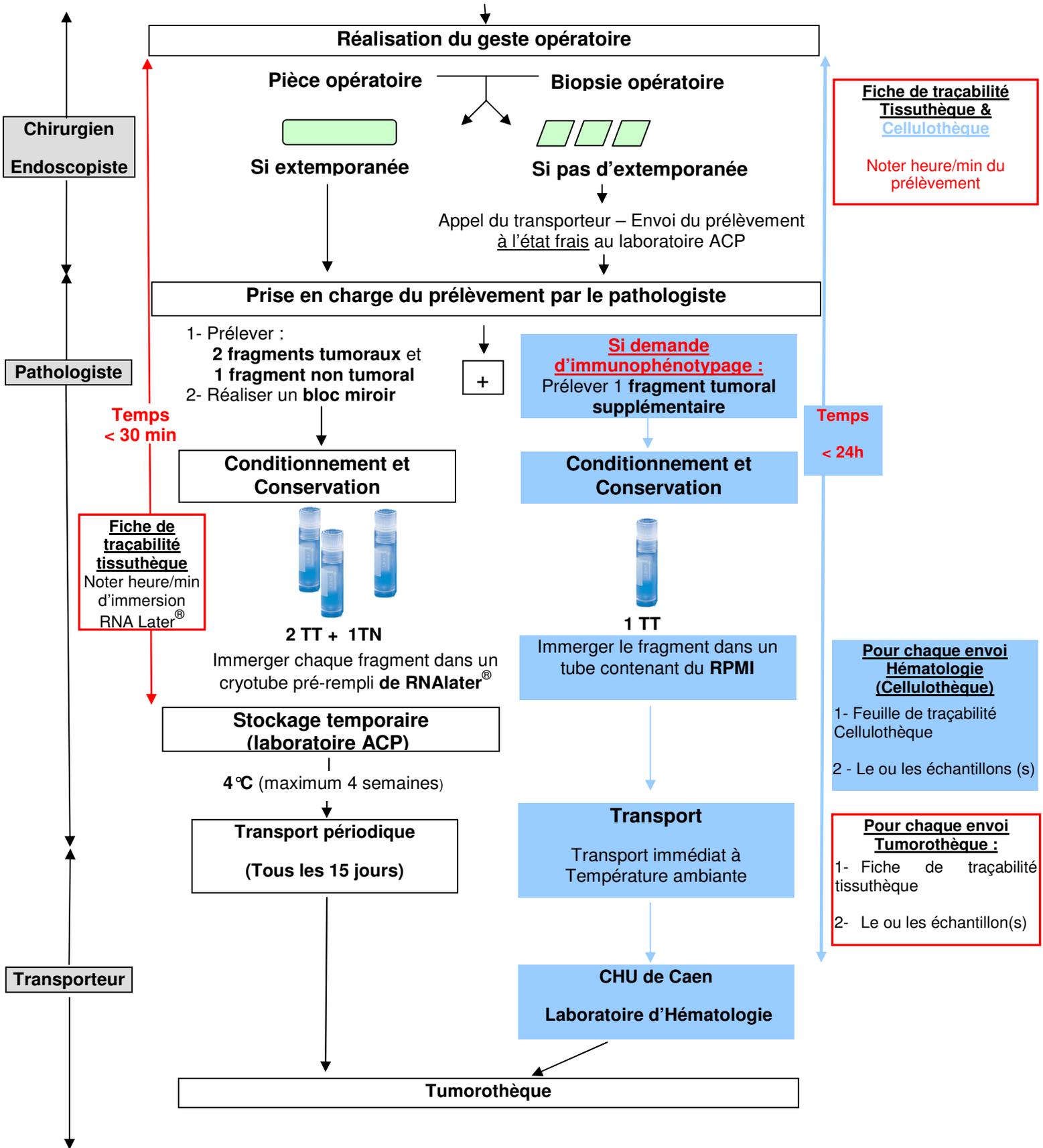

Le médecin préleveur :

1. **Contactera le pathologiste** dès l'arrivée d'un lymphome, et pour toute demande d'immunophénotypage, contactera le laboratoire de cytométrie de flux du CHU de Caen tél : 02 31 06 53 30)
2. **Informera le patient** (ou les parents lorsqu'il s'agit d'un mineur) qu'un fragment de tumeur sera cryopréservé dans la tumorothèque Caen Basse-Normandie et que le prélèvement ainsi conservé peut être utilisé à but diagnostique et/ou à titre scientifique.
3. Remettra au patient (ou aux parents du mineur) la lettre d'information ainsi que le **formulaire de consentement éclairé**
4. Remplira tous les intitulés de la partie « Médecin préleveur » de la **fiche de traçabilité – Tissuthèque et** pour toute demande d'immunophénotypage, **ceux de la fiche de traçabilité – Cellulothèque.**

Prélèvements/Echantillons :

1. Prélever au minimum 2 fragments tumoraux non nécrosés et 1 fragment non tumoral avec du matériel stérile. Pour toute demande d'immunophénotypage, prélever 1 fragment tumoral supplémentaire.
2. Immerger chaque fragment (**0.5cm³**) dans un cryotube avec de la solution **RNA Later[®]** (**le plus rapidement possible, moins de 30 minutes entre exérèse et congélation**). Pour toute demande d'immunophénotypage, déposer le **fragment supplémentaire** dans un cryotube pré-rempli de **RPMI**.
3. Noter sur le(s) tube les informations suivantes : - nom du patient - type de tissu : TT (tissu tumoral) ou TN (tissu non tumoral) - date du prélèvement
4. Fixation et identification des prélèvements miroirs
5. Conserver le tube de RNA Later[®] dans un réfrigérateur (4°C) en attendant l'envoi à la tumorothèque.
6. Remplir tous les intitulés de la partie « Anatomopathologie » de la fiche de traçabilité – Tissuthèque

Envoi CHU Caen – Hématologie CMF (<24H) :

1. Du ou des cryotube(s) de RPMI avec le ou les fragment(s) prélevé(s)
2. La fiche de traçabilité cellulothèque
3. La demande d'examens de cytogénétique

Envoi Tumorothèque Caen Basse-Normandie :

1. Du ou des cryotube(s) de RNALater® avec le ou les fragment(s) prélevé(s)
2. La fiche de traçabilité tissuthèque
3. La demande d'examens de cytogénétique

Le Transport :

1. S'effectuera à 4°C pour les fragments en RNALater et ceux en RPMI
2. Pour les échantillons en RPMI, contacter le transporteur DHL

A l'adresse suivante :

CHU Caen - Laboratoire Hématologie
Cytométrie en flux
Dr Veronique SALAUN – Niveau 3
avenue Côte de Nacre
14000 Caen

Contact : 02 31 06 53 30

3. Pour les échantillons en RNA Later®, Contacter le transporteur Au numéro suivant :

A l'adresse suivante :

Tumorothèque Caen Basse-Normandie
Au Centre François Baclesse, RDC Batiment Grecan
3 avenue du Général Harris
14076 Caen cedex 5

Contact : Personnel Tumorothèque au 02 31 45 52 74.

A postériori :

1. **Transmettre le compte-rendu ACP** (noter : « un (des) prélèvement(s) a(ont) été stocké(s) dans la Tumorothèque Caen Basse-Normandie. Le prélèvement miroir fixé est représentatif de la lésion »
OU transmettre une **lame HES du bloc miroir** à la Tumorothèque
2. La copie du formulaire de consentement éclairé signé